


Technische specificaties

	Euro-Pulse lavage adapter	Euro-Pulse batterij	Euro-Pulse lavage CO2
Gewicht	210 gram	210 gram	1 kg
Tube lengte	3,6 meter	3,6 meter	3 meter
High speed	1200ml / min	1200 ml / min	1100~1400 ml / min (30 mm cone tip) 1000~1300 ml /min (coaxial tip)
Low speed	600ml / min	600ml / min	700ml / min
Druk	Tot 1 bar	Tot 1 bar	50 psi
Uitgang	DC 8V uitgang	8 x 1.2V AA batterij	
Inhoud verpakking	handstuk, irrigatieslang, zuigslang, stroomsnoer, heupcanule ST01Z, kniecanule CT02Z, gebruiksaanwijzing	handstuk, irrigatieslang, zuigslang, batterij pak, heupcanule ST01Z, kniecanule CT02Z, gebruiksaanwijzing	handstuk, irrigatieslang, zuigslang, CO2 slang, batterij, heupcanule ST01Z, kniecanule CT02Z, gebruiksaanwijzing
Niet inbegrepen	230V adapter		batterij, oplaadbare batterij, batterij oplader



Euro-Pulse
Disposable pulse lavage systeem

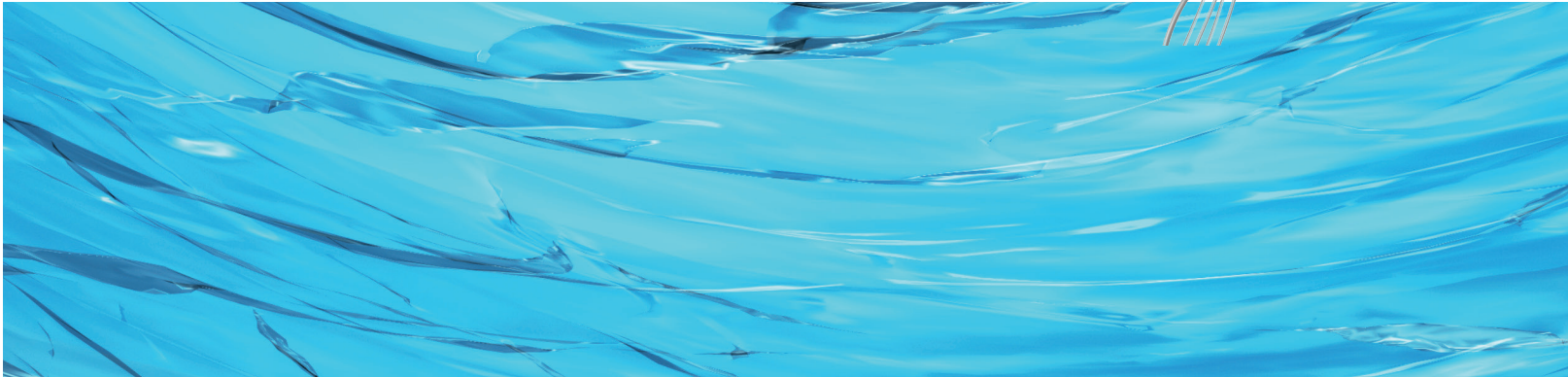

Euro-Pulse

Compleet, krachtig en disposable pulse lavage systeem voor reinigen en spoelen van gewricht of trauma.

Het Euro-Pulse disposable pulse lavage systeem is ontworpen om het irrigatie- en debridementproces in prothesechirurgie en trauma-procedures te vereenvoudigen. De hoge druk verwijdt efficiënt bot- en cementdebris en zorgt daarmee voor een grondig gereinigd bot-cement-interface.

Schakelaar
voor hoge of lage druk

Voordelen

- Volledig disposable
- Gelijktijdig spoelen en zuigen
- Twee standen:
 - hoge druk: reiniging bot
 - lage druk: reiniging weke delen
- Ergonomisch, lichtgewicht ontwerp
- Veilige vergrendeling van de canule
- Inclusief smalle heupcanule en korte kniecanule

Adapter of accu

U kiest!

Het Euro-Pulse systeem is leverbaar in een adapter of accu aangedreven versie.



Nieuw!

Euro-Pulse + CO2

Wenst u meer? Dat kan! Euro-Pulse biedt ook een disposable pulse lavage handstuk inclusief CO2 aansluiting.


Met batterij of oplaadbare batterij. Met dit handstuk beschikt u over de mogelijkheid om te spoelen en te drogen. Na grondige reiniging 'blaast' u met de CO2 schakelaar het botbed droog, waardoor het cement nog beter kan hechten.



Canules

Het Euro-Pulse systeem wordt standaard geleverd met een korte kniecanule én een smalle heupcanule. **Een andere canule nodig? Bekijk ons uitgebreide assortiment canules.**

ST01Z Euro-Pulse 35mm Cone Tip Fan Spray

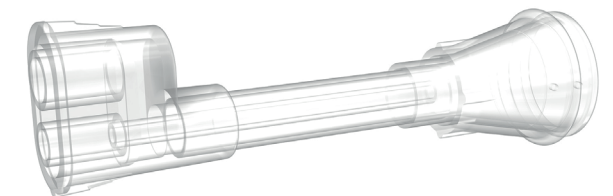

CT02Z Euro-Pulse Coaxial Canal tip

