

Technische specificaties

Temperatuur	Laag 32°C / Gemiddeld 38°C / Hoog 43°C
Temperatuur sensoren	2
Temperatuur alarm	Audio en visueel
Aansluiting	220~240~, 50/60Hz, max. 4,5A
Lengte slang	1,8 meter
Kabel	4,6 meter
Afmetingen	H37 x B22 x D16
Gewicht	3,5 kg
Filter	Hepa filter 0,3µm

Euro-Blanket
Gesloten patiënt verwarmingssysteem



Nieuw!

Reduceer het risico van infecties!

Gesloten patiënt verwarmingssysteem

Met andere 'Forced Air' verwarmingsdekens ontstaan luchtstromen die uit de dekens lekken. Deze lekkages kunnen de luchtstromen verstoren waardoor gecontamineerde partikels een potentieel risico vormen voor infecties.

De Euro-Blanket is een volledig gesloten patiënt verwarmingssysteem. U beschikt over een uniek temperatuur management systeem dat is ontwikkeld om hypothermie pre-, per- en postoperatief te voorkomen.


Het gesloten systeem zorgt ervoor dat er geen lekkage is van lucht tijdens gebruik, waardoor het risico van infectie wordt beperkt. Daarnaast wordt er geen verwarmde lucht naar de operatiekamer gelekt waardoor het klimaat en de steriele luchtstroom in de operatiekamer niet verstoord worden.

Voordelen


- Gesloten systeem, waardoor het klimaat en de luchtstroom niet verstoord worden
- Minimaliseert infectiegevaar
- Voorkomt hypothermie pre-, per- en postoperatief
- Voorkomt hyperthermie
- Systeem is klein, licht, veilig, stil en gebruiksvriendelijk
- Leverbaar met ophangstelsel of trolley



Beschikbare toepassingen

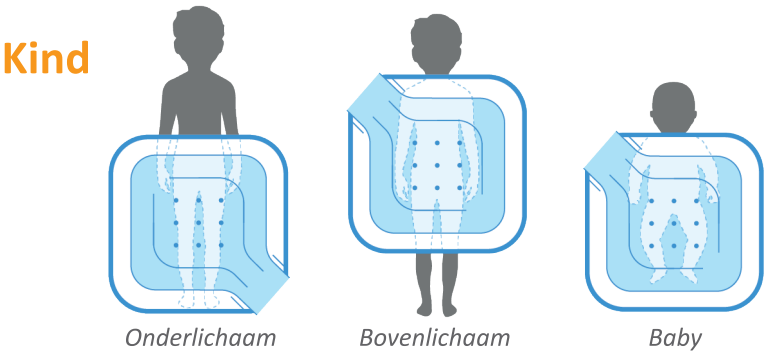

Volwassene

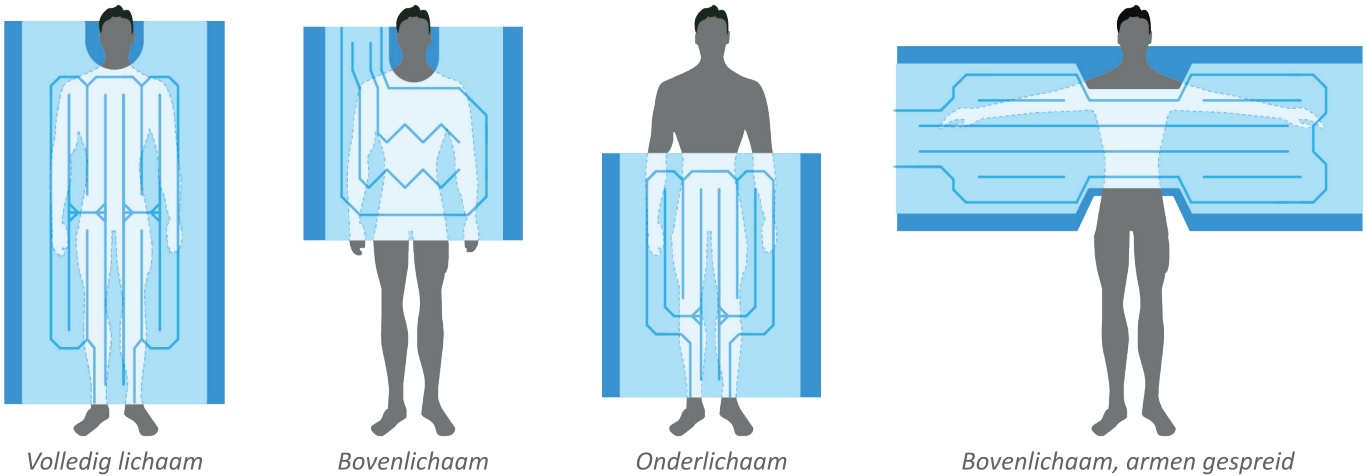

Verstoring luchtstroom

Euro-Blanket

Warme lucht lekt NIET.
Minimaal infectiegevaar.

Andere systemen

Warme lucht lekt.
Groter infectiegevaar.